



Sağlık hayatı,
hayat için
bugünden tanışalım...



Sağlık hayattır,
hayat için
bugünden tanışalım...



Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK) nedir?

TAK insanların mesanelerindeki (idrar torbası) idrarı düzenli, güvenli ve uygun bir şekilde boşaltmalarını sağlamak ve mesaneye ilaç vermek maksadıyla dış idrar yolundan takılan ince esnek ve kaygan bir sondadır.

TAK (Sonda) Niçin Kullanılır?

Hastanın yaşamını kontrol etmesi yerine hastaların mesanelerini kontrol etmesini sağlamaktadır. Bu yöntem mesanenin etkin boşalmasını sağlamasının yanı sıra hastanın kuru kalmasına yardımcı olur. TAK uygulaması tekrarlayan enfeksiyonlara neden olan içeride biriken idrar boşaltır ve böbreklerin korunmasına yardımcı olur. TAK uygulamasının yaşam kalitesini artırdığı ve bu yöntemle hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri bilinmektedir.

Günde Kaç Defa TAK Yapılmalı?

Kateterizasyonun sıklığı birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Mesane hacmi, sıvı alımı, işeme sonrası mesanede kalan (rezidüel) idrar miktarı ve ürodinamik ölçütlerle (mesane yumuşaklığı ve basıncı) bakılarak kateterizasyon sıklığına karar verilir. Mesanenin tam dolmasına izin vermeyecek şekilde, günde en az 4 kez yapılmalıdır. TAK sıklığını siziz izleyen hekiminiz belirlemelidir.

TAK Uygulamasının Faydalari Nelerdir?

TAK uygulayan hastalardaki üriner sistem enfeksiyonu sıklığı uzun süreli kateter uygulayan hastalarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak azdır. Üst üriner sistem, reflü sonucu gelişebilecek hasardan korunur. Hasta kendisi mesanesini kontrol etme yeteneğine sahip olduğundan, bağımsızlığını yitirmemiş olur. Bu yönteme erişkin hayatı mesanenin cinsel ilişki öncesi boş olması sağlanarak idrar kaçırma önlenir, böylece sağlıklı bir cinsel yaşama olanak sağlanır. Hastanın yaşam kalitesi ve memnuniyeti artırılabilir.



Sirketimiz Konya ili Beyşehir ilçesinde hidrofilik sonda üretimi yapmaktadır. Faaliyete başladığından beri firmamız sağlıklı yaşam için kaliteyi her zaman göz önünde bulundurmayı presnip edinmiştir. Üretim konusu olarak Üriner Kateter üretimi yapmaktadır. SGD Medikal ISO 13485 ve CE belgelerine sahip bir firmadır. Türkiye'de hidrofilik sonda üretiminde entegre tesis olarak üretim yapan ilk ve tek firmadır. Tıbbi cihazımızın üzerinde kayanlaşmayı kolaylaştıran, jel sürtünmemeyi yüzde 85-95 arasında azaltmaktadır. Bunun sonucu olarak ürünlerimiz ağrı duymaksızın rahat bir şekilde kullanılabilir.

Tam anlamıyla sizin daha özgür ve hijyenik bir ortamda yaşamanız için üretilmiştir. Böylece seyahatte, alışverişte, okulda, işyerinizde daha huzurlu ve güvenli olmanıza olanak sağlayacaktır. Ürünümüzün en büyük özelliği tek kullanımlık olmasıdır. Dağıtımını ülkenin tüm bölgelerine yapmaktadır. İhracat çalışmaları devam etmektedir. Yeni ürünleriyle kaliteyi korumaya devam edecektir. İnsan sağlığını her zaman ön planda tutan firmamız, yore de sağlığı istihdamla, bölgenin gurur kaynağı olmuştur.

Unutmayın, biz sizin sağlığınıza için çalışıyoruz...



Our company is producing hydrophilic catheter in Beyşehir District of Konya Province. Since it started to be a active producer, hight importance attached to the quality has always been the principle of our company. Production of urinary catheter is the subject of production of our company. SGD Medical is a company that has ISO 13485 and CE certificates. It is the first and the only company that makes production in the field of hydrophilic catheter production as an integrated facility. The gel on our medical equipment that make slipperiness easy, decreases friction by 85-95 percent. As a result of this, our product can be used easily without having pain.

It is produced to enable you to live in a more free and hygenic environment completely. Therefore, it will provide you the comfort to be more untroubled and secure in travel, shopping, school. The most important characteristics of our product is that it is used only once. Its distribution is made over all regions of the country. Works on exportation of the product continues. Our company will continue protect quality with its new products. Our company for which human health always comes first has been the proud of the region with the employment it has created.

Do not forget, we work for your health...





Yaşam Kalitenizi Önemsiyoruz....
İntermitent Katerizasyon için
SGD (Tak) Katater

We Care About Your Life Quality...
SGD (Tak) Catheter For
Intermittent Categorization







YAŞAM KALİTEİNİZİ ÖNEMSİYORUZ...



intermitent katerizasyon için SGD (TAK) katater

Kendinden Jelli (Su ile temas edince kayganlaşan)
Tek Kullanımlık (Steril Pakette)
Üstün Ürün Kalitesi







■ Nelaton Kataler
■ Nelaton Catheter

■ Teknik Özellikleri
■ Technical Specifications

Giriş kolaylığı sağlayan yüzey - Surface that provides entrance easiness

Bükülmeye önlüyor uygun sertlik - Appropriate hardness that prevent contortion

Travma oluşturmayan yuvarlatılmış, kapalı distal uç - Closed rounded distal end that do not create problem

Çapraz iki yan delik - Two transverse side holes

Renk kodlu funnel konnektör - Funnel connector with color code

Uzunluk - Length



UTILIZATION OF HYDROPHILIC SOUNDER WITH GEL

Since mounting and detaching the Hydrophilic Sounder with Gel is easy, it is suitable for your urethra (Easy to Use). This catheter (sounder).The production is slippery while it is wet. When you use Hydrophilic Sounder with Gel, the only surface that is in contact with the sensitive urethra mucous is the water surface. You will not be bothered by unpleasant friction and the lubricant utilization thanks to Hydrophilic Sounder with Gel. Before using, submerge the Hydrophilic Sounder with Gel into water only for 30 seconds. So, the catheter will connect the water to the surface and it will enable the surface remains wet during the catheterization. This way, it will be easy for you while mounting and detaching the Hydrophilic Sounder with Gel.

Boyut Dimension	Renk Colour	Çap Diameter
06 ch	Ağır Yeşil Light Green	○
08 ch	Mavi Blue	○
10 ch	Siyah Black	○
12 ch	Beyaz White	○
14 ch	Yeşil Green	○
16 ch	Turuncu Orange	○
18 ch	Kırmızı Red	○
20 ch	Sarı Yellow	○
24 ch	Koyu Mavi Dark Blue	○



ERKEKLER İÇİN HİDROFİLİK JELLİ SONDA KULLANIMI

Erkek alt üriner sistem kesiti. Erkek üretrasi 15-18 cm uzunluğunda ve S-şeklinededir. Penis karna doğru kaldırma yoluya S-şeklinin doğrulanmasını sağlar ve kateterin takılmasını kolaylaştırırınız.

- 1- Ellerinizi bol su ile yıkayın ve kateteri hazırlayın.
- 2- Kendinize uygun pozisyonu bulun. Oturarak veya ayakta durarak mümkün olduğunda rahat olun.
- 3- Penis'i karna, yukarı doğru kaldırın. Böylece üretriniz doğrulacaktır ve kateteri takmanız kolaylaşacaktır.
- 4- Penisini çok fazla sıkmayın.
- 5- Kateteri takmadan önce hafifçe öne hazırlayın bırakın. Böylece idronuz isteğiniz dışında bir yere akmaz.
- 6- İdrar gelmeye başlayana kadar kateteri yavaşça üretra yolu ile mesaneye doğru takın.
- 7- İdrar geliştiğinde penisini tekrar karnınıza doğru kaldırarak kateteri çıkarın.
- 8- Kateteri atın ve ellerinizi bol su ile yıkayın.




UTILIZATION OF HYDROPHILIC SOUNDER WITH GEL FOR MALES

Male sub - urinary system section. Male urethra is 15 -18 cm of length and in the shape of S.

By way of pulling the penis towards the abdominal, it enables that the S shape is corrected and putting the catheter becomes easy.

- 1- Wash your hands with plenty of water and prepare the catheter.
- 2- Find the most suitable position for yourself. You can sit or stand up, as long as you are comfortable.
- 3- Pull the penis towards the abdominal. Likewise, your urethra shall be corrected and it shall be easier for you to put the catheter.
- 4- Do not tighten your penis too much.
- 5- Slightly twist the catheter toward the front before putting it. Therefore urine does not drain away.
- 6- Put the catheter slightly towards the bladder by the way of urethra until urine comes.
- 7- When you have urinated, pull your penis towards the abdominal again and remove the catheter.
- 8- Throw the catheter away and wash your hands.

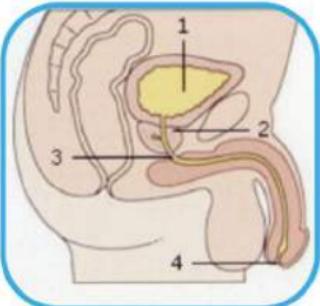



KADINLAR İÇİN HİDROFİLİK JELLİ SONDA KULLANIMI

Üretra açılığı küçük bir yıldızla benzer. Başlangıçta bir ayna doğru yeri bulmanızı sağlayacaktır. Kateteri takma alışkanlığını edindikten sonra üretra açılığını hissederek bulmanız daha kolay bir yoldur ve sizin daha esnek olmanızı sağlayacaktır.


- 1- Ellerinizi bol su ile yıkayın ve kateteri hazırlayın.
- 2- Kendinize uygun pozisyonu bulun. Mümkün olduğunda rahat bir pozisyonda oturmaya çalışın.
- 3- En azından başlangıç aşamasında bir ayna üretra açılığınızı bulmanızı kolaylaştırılacaktır.
- 4- Kolcanınızı hafifçe öne doğru itin.
- 5- Bir elinizi işaret ve orta parmağın yardımı ile dudakların cırrını hafifçe yukarı doğru çekin. Böylece üretra açılığınızı daha rahat görebilirsiniz.
- 6- Kateteri takmadan önce hafifçe öne bükün. Böylece idrarınız isteğiniz dışında bir yere akmaz.
- 7- İdrar gelmeye başlayanaya kadar kateteri yavaşça üretra yolu ile mesaneye doğru takın.
- 8- İdrar geliştiğinde kateteri çıkarın.
- 9- Kateteri atın ve ellerinizi bol su ile yıkayın.



UTILIZATION OF HYDROPHILIC SOUNDER WITH GEL FOR FEMALES

The urethra aperture is like a small star. In the beginning, a mirror can help you to find the right location. After you get used to mounting the catheter, to find the urethra aperture by means of feeling is much easier and it shall enable that you are more flexible.

- 1- Wash your hands with plenty of water and prepare the catheter.
- 2- Find a suitable position for yourself. Try to seat in a comfortable way.
- 3- At the beginning, a mirror will help you to find your urethra aperture.
- 4- Push your thigh slightly towards the front.
- 5- Split the lips with the help of your fingers and pull it slightly upwards. So that you can see the urethra aperture much easily.
- 6- Slightly twist the catheter towards the front before mounting it. So urine does not drain away.
- 7- Put the catheter slightly towards the bladder by the way of urethra until urine comes.
- 8- After you have urinated, remove the catheter.
- 9- Throw the catheter away and wash your hands.

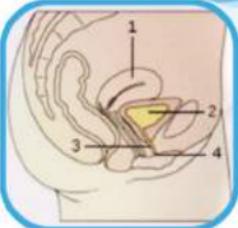



Sağlık Ürünleri
İmalat İhr. İth. Ltd. Şti.

Hamidiye Mh. Yeşilyurt Sokak
B Blok No: 3 Beyşehir / KONYA

Tel : +90 332 512 81 40

Fax : +90 332 512 82 40

www.sgdmedikal.com

sgd@sgdmedikal.com

